




Medzinárodné centrum
pre telemedicínu

palpitacie.sk
mdt.cz



videonávod

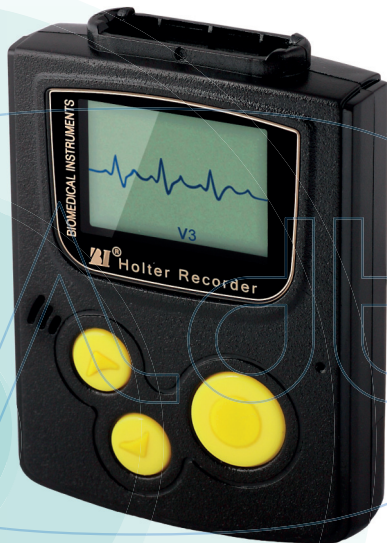

SK

návod

a dôležité informácie pre použitie

VERZIA 2026_01

EKG holter BI

Vážený pán, Vážená pani,
priložený EKG holter je určený na záznam Vášho EKG.
Zaznamenaný EKG záznam pomôže určiť príčinu
Vašich ťažkostí alebo overí dlhodobý efekt zákroku,
ktorý ste podstúpili.

To je kľúčové pre Vašu ďalšiu úspešnú liečbu.

Prosím, starostlivo si preštudujte tento návod.

Dôležité upozornenia

V prípade, že sa u Vás počas nosenia EKG holtera objavia ťažkosti, stlačte tlačidlo ENTER (symptomové tlačidlo) a zapíšte si túto udalosť do denníka.

Ak máte nastavené viacdnové nahrávanie, pred hygienou si odlepte EKG elektródy, prístroj odložte, a po skončení hygieny nalepte nové elektródy a znovu pripojte patientsky kábel.

Počas nahrávania nikdy nevyberajte batériu ani neodpájajte EKG patientsky kábel od prístroja!

EKG holter nie je vodotesný – nikdy ho nenamáčajte (nekúpte sa s ním, nesprchujte sa!) a chráňte ho pred poškodením.

Napojenie by malo prebehnúť do 24. hod od jeho prevzatia.

Za každý deň omeškania je dodatočný poplatok 10,- eur/1 deň.

Od lekára ste dostali balíček, ktorý obsahuje:

- 1 EKG holter s EKG káblom
- 2 Puzdro na EKG holter
- 3 Tento návod
- 4 Nalepovacie elektródy
- 5 Mikrotužkovú batériu AAA
- 6 Obálku na spätné odoslanie




Holter – funkcie tlačidiel:

Displej


pohyb
nahor
/doľava

pohyb
nadol
/doprava

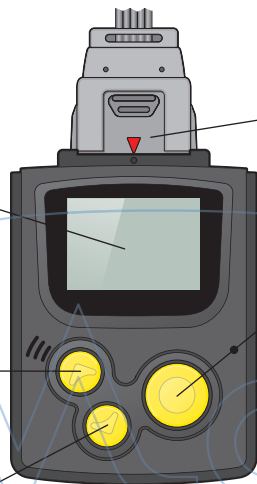


Konektor
patientskeho
kábla

Enter
– potvrdenie
(symptomové
tlačidlo)

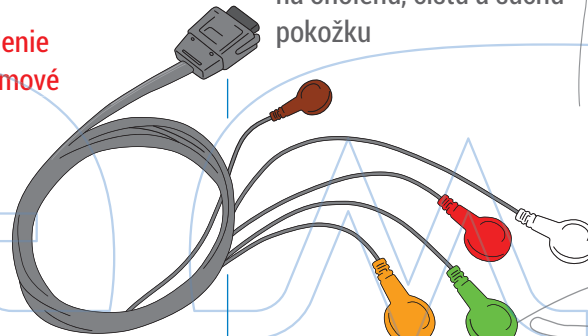


Návod: **Nalepenie elektród, nasadenie holtera a spustenie nahrávania**

- 1 Spojte 5 elektród s káblíkmi a podľa obrázku a farebného rozloženia si ich nalepte na oholenú, čistú a suchú pokožku

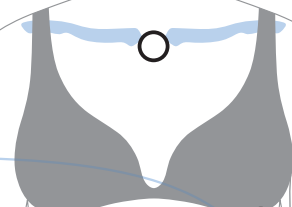

- 2 Zo zadnej strany EKG holtera vložte mikrotužkovú batériu AAA.

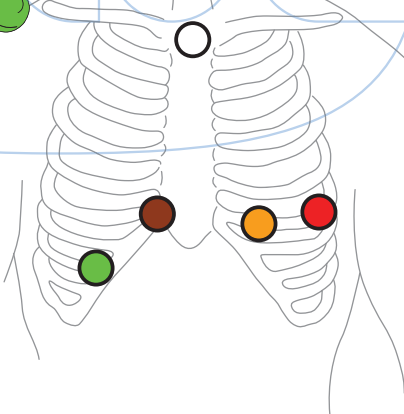

Po prečítaní návodu a správnom napojení prosíme zaslať SMS s textom:

Priezvisko pacienta, dátum a čas napojenia (uvedený na displeji).

Odoslať na číslo: **+421 918 348 201.**

- 3 Potvrďte Enterom voľbu
>Spustiť záznam<

▶ Spustiť záznam ◀
Nastavení systému
Pokročilé nastavení
Informace o verzi


- 5 Tlačidlami (vľavo/vpravo) vyberte **OK** a **Enterom** potvrďte.
– Tým sa začne nahrávanie EKG.

Spustiť záznam EKG?


OK

Koniec

- 4 Na displeji sa zobrazí krivka Vášho EKG – pokračujte opätovným stlačením tlačidla **Enter**.

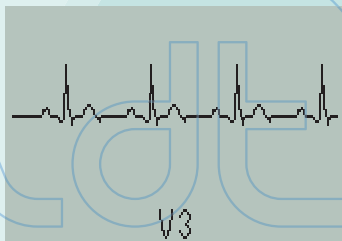

- Ak sa na displeji objaví iba rušenie, skontrolujte pripojenie elektród, kým neuvídite EKG krivku.

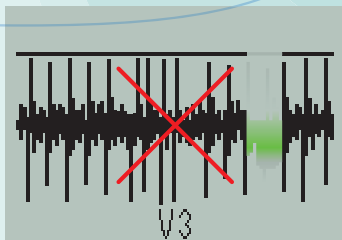

Počas nahrávania

Na displeji sa zobrazuje finálny stav, ktorý je prítomný počas celej doby merania. Informuje Vás, že záznam EKG je aktívny.

V prípade Vašich ťažkostí počas nahrávania stlačte raz tlačidlo Enter (symptomové tlačidlo).

Zobrazované údaje:

Aktuálny dátum

21-05-2018 Pondělí
Uplynulý čas: 00:00:09 NAHRAT

Uplynulý čas merania

16:14:30

Aktuálny čas

ID:
Jméno:

Ukončenie záznamu

Po skončení nahrávania sa na displeji objaví nápis „HOTOVO“. Nikdy nevyberajte batériu, nesmie sa opakovane vložiť, lebo sa premažú všetky nahraté dáta a nikdy neodpájajte patientsky kábel od záznamníka.

Holter, ochranné púzdro, oba popruhy a nepoužité elektródy spolu s denníčkom vložte do prepravného obalu a pošlite späť v priloženej obálke.

Kontaktujte nás:

Starostlivo si prečítajte tento návod a v prípade akýchkoľvek problémov nás neváhajte kontaktovať.

+421 42 32 11 239

alebo

+421 915 764 661



Naše linky sa prepájajú na robotický systém telefonovania, kde sa dovoláte, keď stlačíte možnosť 3 (nečakajte na linke viac ako 5 min, aby ste neblokovali linku, ozveme sa späť, keď vybavíme pacientov pred vami)